

医療者の皆様へ



日本ルフト株式会社


医療機器部

### オキシマイザーF-224 代替品につきまして

オキシマイザーF-224の代替品につきましては、オキシマイザーコンサービングカニューレ、オキシマイザーペンダント、その他、酸素マスクなどがございます。

下記グラフはオキシマイザー 3製品の吸入酸素濃度の目安となります。オキシマイザーコンサービングカニューレ、オキシマイザーペンダント、酸素マスクなど、代替品の処方にあたっては各酸素投与器具の添付文書に従い、患者様の酸素化を確認いただきますようお願いいたします。


#### オキシマイザーF-224 吸入酸素濃度の目安

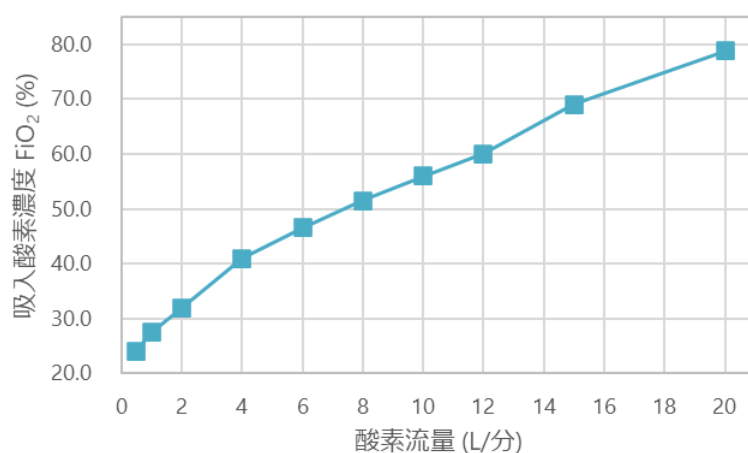

酸素流量 (L/分)	F-224 (%)
0.5	24.0
1	27.5
2	32.0
4	41.0
6	46.5
8	51.5
10	56.0
12	60.0
15	69.0
20	78.8

※ FiO<sub>2</sub>は実測より算出された値です。

#### 吸入酸素濃度の目安 (オキシマイザーコンサービングカニューレ、オキシマイザーペンダント)

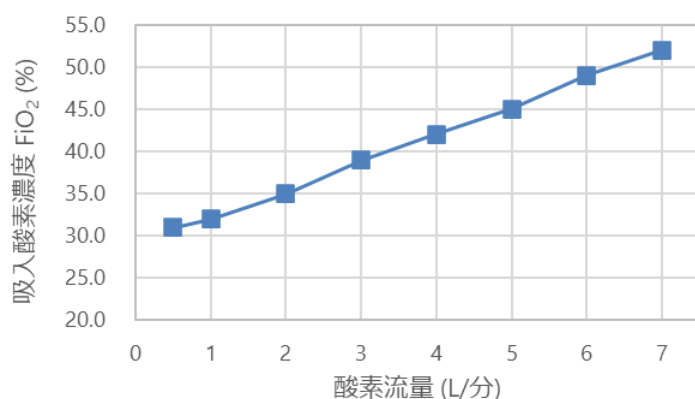

酸素流量 (L/分)	O-224 / P-224 FiO <sub>2</sub> (%)
0.5	31.0
1	32.0
2	35.0
3	39.0
4	42.0
5	45.0
6	49.0
7	52.0

※ FiO<sub>2</sub>は計算より算出された値です

代替品として、オキシマイザーコンサービングカニューレ、オキシマイザーペンダントをご使用の場合には設定流量が最大 7L/分となりますことご注意ください。

また、水濡れに注意し、高温多湿を避けてリザーバーの動きが正常であること、患者様の健康状態に問題がないか確認しながらお使いください。

その他、オキシマイザーに関する Q&A につきましては弊社ホームページに掲載しております。

下記 URL より参照頂けますようお願いいたします。

[https://www.nihon-rufuto.com/medical/breathing/image/oxymizer\\_download01.pdf](https://www.nihon-rufuto.com/medical/breathing/image/oxymizer_download01.pdf)

## お問い合わせ先

日本ルフト株式会社 医療機器部 営業部

東京都千代田区神田錦町 2-7-5

TEL: 03-3518-2001 FAX: 03-3518-6001

※ご不明な点などございましたら、ご遠慮なく弊社営業部までお問い合わせください。

以上